

POWER SERIES

# AVIVA RX Modulite



Straordinaria carrozzina elettronica a trazione posteriore  
con seduta Modulite estremamente adattabile e confortevole.



| AVIVA RX Modulite

# Esperienza di guida sicura e confortevole.

Design. Tecnologia. Prestazioni.

Scopri **AVIVA RX**. Carrozzina elettronica a trazione posteriore ad elevate prestazioni con seduta Modulite che offre il massimo comfort in ogni situazione.



| AVIVA RX Modulite

# Design. Tecnologia. Prestazioni.

Dai un'occhiata più da vicino alla base di **AVIVA RX**. AVIVA RX è la prima carrozzina della linea AVIVA e stabilisce un nuovo standard per le carrozzine a trazione posteriore. Ideata secondo le ultime innovazioni tecniche per garantire prestazioni di guida avanzate.



## **Sospensioni CTC (brevettate)**

Progettate per assorbire le vibrazioni e i sobbalzi durante l'utilizzo, garantiscono un comfort ottimale e una maggiore stabilità, grazie alle quattro ruote che rimangono sempre a contatto con il suolo.



## **LiNX G-Trac Gyro**

Percorrere lunghi tragitti o viaggiare a velocità più elevate non è mai stato così facile grazie alla tecnologia LiNX G-Trac Gyro. Un modulo giroscopico integrato nell'elettronica assicura che la carrozzina mantenga la direzione di guida senza deviare dal percorso.



## **Design compatto**

L'interasse più corto e stretto e la seduta più bassa rendono AVIVA RX facile da manovrare e ne garantiscono un controllo accurato in qualunque ambiente, facilitandone l'utilizzo in spazi angusti con uno stretto raggio di sterzata.



## **Elegante e accattivante**

Linee essenziali, angoli arrotondati e finiture di alta qualità sono i tratti estetici distintivi di AVIVA RX. Design moderno. Estetica e performance vanno di pari passo; ampia possibilità di personalizzazione dei colori.

| AVIVA RX Modulite

# Numerose opzioni di posizionamento.

Il nostro versatile sistema di seduta Modulite permette di personalizzare la posizione per garantire il massimo comfort e supporto.

Dalle sedute più semplici alle necessità posturali più complesse, il design modulare offre la massima flessibilità di posizionamento.



## Soluzioni complete

Vasta gamma di opzioni posturali che include schienali, cuscini, braccioli, poggiatesta e molto altro ancora.

## Gamma di opzioni di inclinazione

per garantire la gestione della pressione e massimizzare il comfort.



## Progettata per la sicurezza e il comfort

Il basculamento motorizzato fino a 50° o la combinazione della seduta elevabile fino a 300mm e basculamento fino a 45° garantiscono sicurezza e comfort.



## Pedana LNX

Si estende in lunghezza ed altezza, lavorando in combinazione con il basculamento motorizzato riduce notevolmente le forze di taglio che si possono formare.



## Matrix®: uno schienale pluripremiato

Opzione di seduta Matrix per garantire una "vestibilità" ottimale.



**Seduta sollevabile fino a 300 mm con inclinazione fino a 45°**

| AVIVA RX Modulite

# Seduta Modulite. Versatilità modulare.

La nostra soluzione di seduta più popolare, progettata pensando proprio ai nostri utenti. Grazie all'approccio modulare, la seduta Modulite può essere personalizzata facilmente per adattarsi perfettamente e garantire comfort e supporto eccezionali.

## Specifiche tecniche

Larghezza della seduta: 330 - 530mm

Profondità della seduta: 410 - 510mm

Altezza della seduta: da 435mm

Altezza del bracciolo: 230 - 390mm

Altezza della pedana: 280 - 460mm



Seduta  
regolabile  
per una  
"vestibilità"  
perfetta



| AVIVA RX Modulite

# Con tecnologia **LiNX**<sup>®</sup> di nuova generazione.

La tecnologia **LiNX**<sup>®</sup> offre un'esperienza di guida personalizzata e disinvolta. L'innovativa tecnologia apprende le abitudini e le preferenze nel corso del tempo, rendendo il sistema super intuitivo.



## Nuovo Supporto Joystick Resolve

- Eccezionale range di posizioni del joystick per un comfort ottimale.
- Sgancio con resistenza regolabile.
- Comfort e controllo ottimizzati.



## Touchscreen 3.5"

Grande display a colori da 3.5" con joystick, tachimetro e contachilometri.



## Comandi alternativi

Tra cui rientrano i comandi compatti per accompagnatore, comandi occipitali e comandi di prossimità a quattro sensori.



## Bluetooth<sup>®</sup> integrato

Assicura la connettività ai dispositivi e ai comandi ambientali.



## Opzioni di comando

Una vasta gamma di opzioni di comando consente una configurazione personalizzata per ottenere il massimo controllo e la certezza che la carrozzina reagisca in modo affidabile.





AVIVA RX Modulite

# Dati tecnici.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale utente, visitate il nostro sito web [www.invacare.it](http://www.invacare.it).

## Colori

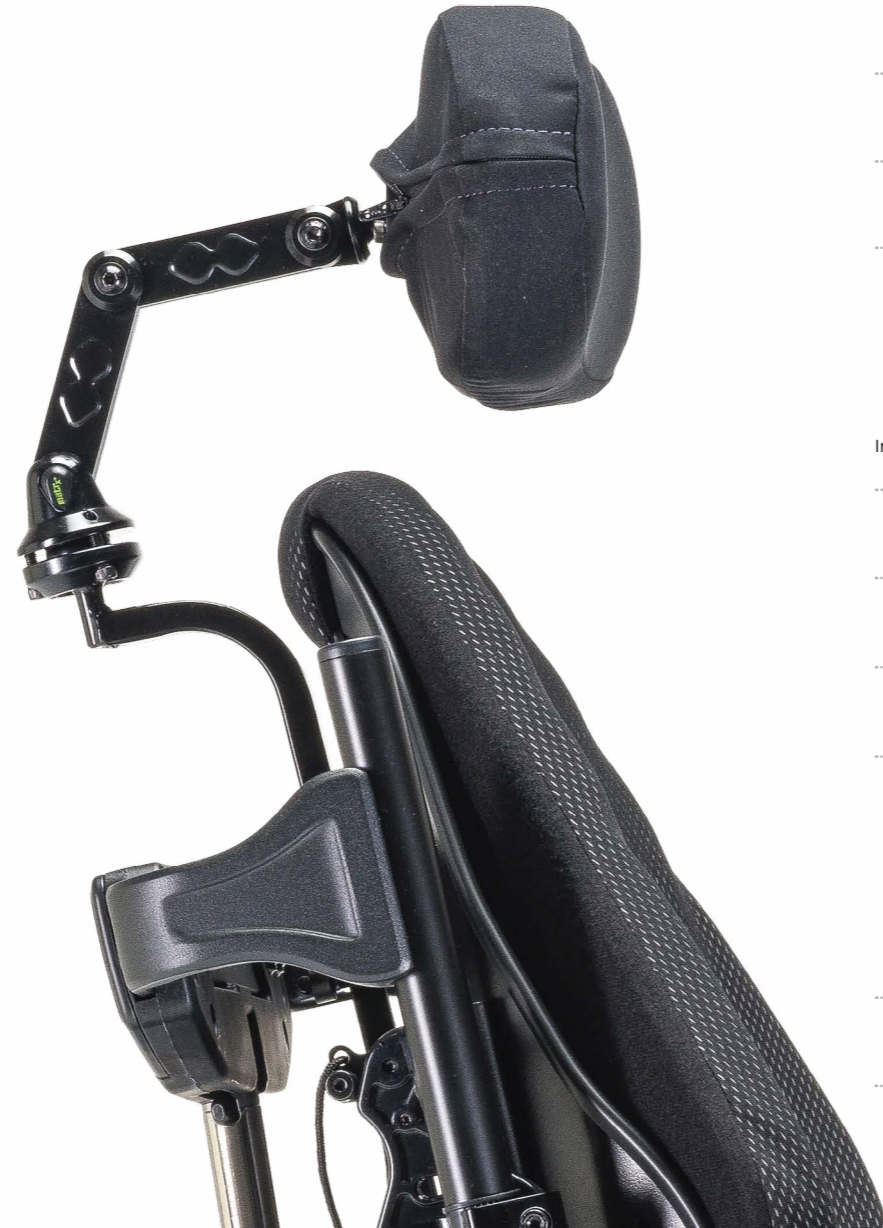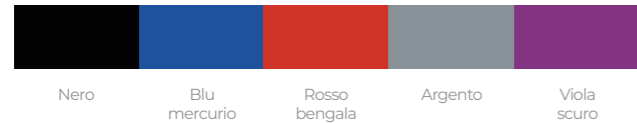

Larghezza della seduta	Profondità della seduta	Altezza della seduta	Altezza dello schienale	Altezza del bracciolo	Poggiapiedi	Basculamento

<b>AVIVA RX con seduta Modulite fissa</b>						
430 - 480 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480 mm - 540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 20°
<b>AVIVA RX con seduta Modulite telescopica</b>						
330 - 530 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480, 540, 560 - 610 mm	230 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
<b>AVIVA RX HD:</b>						
620 - 650 mm	510 - 580 mm	435 - 485 mm	540 mm	245 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 30°

Inclinazione dello schienale	Altezza totale	Lunghezza totale inclusa la pedana	Lunghezza totale esclusa la pedana	Ampiezza dell'unità di trazione	Peso massimo dell'utente	Capacità della batteria

<b>AVIVA RX con seduta Modulite fissa</b>						
90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah
<b>AVIVA RX con seduta Modulite telescopica</b>						
90° - 120°	1000 - 1335 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah
<b>AVIVA RX HD:</b>						
90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	635 mm	160 kg	60/73.5 Ah

Diámetro di sterzata	Altezza massima degli ostacoli superabili	Pendenza massima in sicurezza	Velocità	Distanza percorribile	Peso totale
AVIVA RX	75 mm (100 mm con salicordoli)	6° / 10.5%	Fino a 12 km/h	Fino a 47 km	Fino a 185.2 kg

| AVIVA RX Modulte

# Condividi le tue idee e aiutaci a progettare il futuro delle carrozzine elettroniche.

Ti invitiamo a **condividere la tua opinione**.  
Le tue considerazioni ci aiuteranno a fornire  
un servizio migliore alla comunità degli  
utenti di carrozzine elettroniche.

Scannerizza e compila il modulo.



Grazie per consentirci di essere i tuoi  
compagni di viaggio.

**Il Team della POWER SERIES di Invacare**





Condividi la tua opinione.

SUBSCRIBE



La mia carrozzina mi  
permette di essere  
indipendente e di uscire  
tutti i giorni.

Ian Mackay  
Ambasciatore Invacare

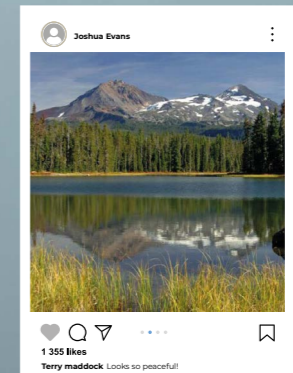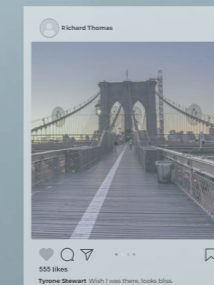



P O W E R   S E R I E S

**AVIVA RX**

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

**Telefono: +39 0445 380059**

[italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

[www.invacare.it](http://www.invacare.it)

©2024 Invacare International GmbH. Tutti i diritti sono riservati. Tutte le informazioni citate sono ritenute corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto senza preavviso. IT - AVIVA RX Modulte - 12/2024.

