



**matrx<sup>®</sup>MAC**



**SCHIENALE MULTIREGOLABILE**

Precisione, comfort e supporto





## matrx® MAC

Matrx® MAC è il nuovo schienale sagomato altamente configurabile, disponibile anche con l'esclusiva imbottitura HUG per un comfort massimo.

### GRANDE MODULARITA'

Completamente configurabile per per adattarsi ad una vasta gamma di morfologie, si adatta a molteplici situazioni posturali grazie alle numerose regolazioni di cui dispone. Matrx MAC è la nostra soluzione per fornire un corretto posizionamento, comfort e supporto.



### PRECISIONE

Un team di progettazione, supervisionato da un'equipe medica, ha studiato questo sistema di postura che mira all'efficienza, alla precisione e alla qualità del prodotto. Abbinato ai diversi supporti laterali, esso compone un sistema posturale ideale.



### COMFORT

La forma sagomata e l'imbottitura HUG (opzionale) offrono una confortevole immersione e una sensazione di avvolgenza che ti abbraccia.



### SUPPORTO

Basato sulla forma anatomica del modello Matrx E2, Matrx MAC asseconda la corretta postura e facilita l'allineamento naturale della colonna.

## **m** Modulare per una perfetta personalizzazione

Matrx® MAC è la soluzione modulare più adatta per carrozzine basculanti e reclinabili. Può essere completato con 3 diverse misure di avvolgenze, interscambiabili e ambidestre, che possono essere abbinate liberamente a seconda delle specifiche esigenze posturali.

### PERSONALIZZABILE

Tre diverse misure abbinabili a piacere




## **m** Indicato nelle scoliosi

L'indebolimento posturale può avere delle ripercussioni sul corretto funzionamento degli organi interni del nostro corpo. Matrx MAC favorisce il posizionamento ottimale della colonna vertebrale per una postura naturalmente corretta.



REGOLABILE IN  
LARGHEZZA E  
ALTEZZA

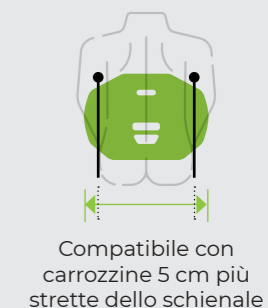

## Scegli Matrix HUG per un extra comfort


Imbottitura HUG (optional) in Stamina Fibre® morbidissima per avvolgerti in un piacevole abbraccio.

- Controllo del micro-clima
- Ipoallergenico
- Lavabile in lavatrice e adatto all'asciugatrice
- Mantiene la forma

Adatto a lievi asimmetrie posturali

Fatti abbracciare da HUG

**matrix**<sup>®</sup> HUG

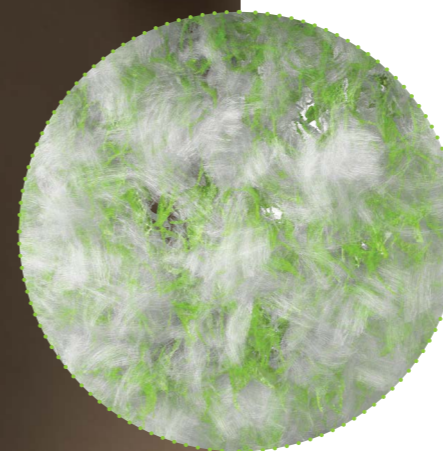

Stamina Fibre®

### IMBOTTITURE



**Dual Layer Foam-Schiuma doppio strato**

Strati di schiuma HR morbidi/rigidi per comfort e sostegno



**HUG**

Imbottitura in Stamina Fibre® soffice e adattabile per una massima avvolgenza.

## **m** Un'occhiata da vicino

Matrx® MAC ha una scocca ergonomica che ricalca quella del rinomato E2 con l'aggiunta di un supporto per scapole, particolarmente utile su carrozzine basculanti e reclinabili.

### **INTERFACCIA POGGIATESTA**

Robusto supporto poggiatesta di serie

### **PANNELLO CENTRALE**

Schiama doppio strato oppure imbottitura HUG con Stamina Fibre® (non presente in foto)

### **UTENSILE PER MONTAGGIO**

Questo utile strumento facilita il montaggio allineando l'hardware e le alette laterali



### **COMBINAZIONE VINCENTE**

Le avvolgenze intercambiabili possono essere abbinate anche in misure diverse per soddisfare le esigenze posturali più complesse

### **REGOLABILE IN LARGHEZZA**

Le avvolgenze sono multiregolabili in modo indipendente l'una dall'altra. Regolazione in larghezza 3 cm.

### **REGOLABILE IN PROFONDITA'**

3 diverse misure per 3 diverse profondità.

### **REGOLABILE IN ALTEZZA**

Le avvolgenze possono essere regolate in altezza in modo indipendente e con l'utente seduto.



## Agganci e optional



### EASYSSET

Sgancio rapido di serie.



### HEAVY-DUTY EASY SET

Aggancio rinforzato, consigliato per pazienti bariatrici.



### SPLIT

Aggancio sdoppiato con sistema ad estrazione per una veloce rimozione dello schienale.



### FISSI

Attacchi fissi che necessitano di attrezzi per la rimozione.


## Tabella misure

		LARGHEZZA				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
ALTEZZA	Compatibile su carrozzine	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
	41cm	●	●	●	●	●
	46cm	●	●	●	●	●
	51cm	●	●	●	●	●
	56cm	●	●	●	●	●

## Dati tecnici

-  Regolabile in inclinazione .....40°
-  Regolabile in profondità .....10 cm
-  Avvolgenze .....9, 15, 23 cm
-  Regolazione in larghezza alette ....2.6 cm
-  Regolazione in altezza alette .....20 cm
-  Cover lavabile a .....60°C
-  Peso massimo utilizzatore .....136 kg
-  Garanzia .....24 mesi

● Matrix MAC con poggiatesta Matrix Loxx su una carrozzina Rea Azalea

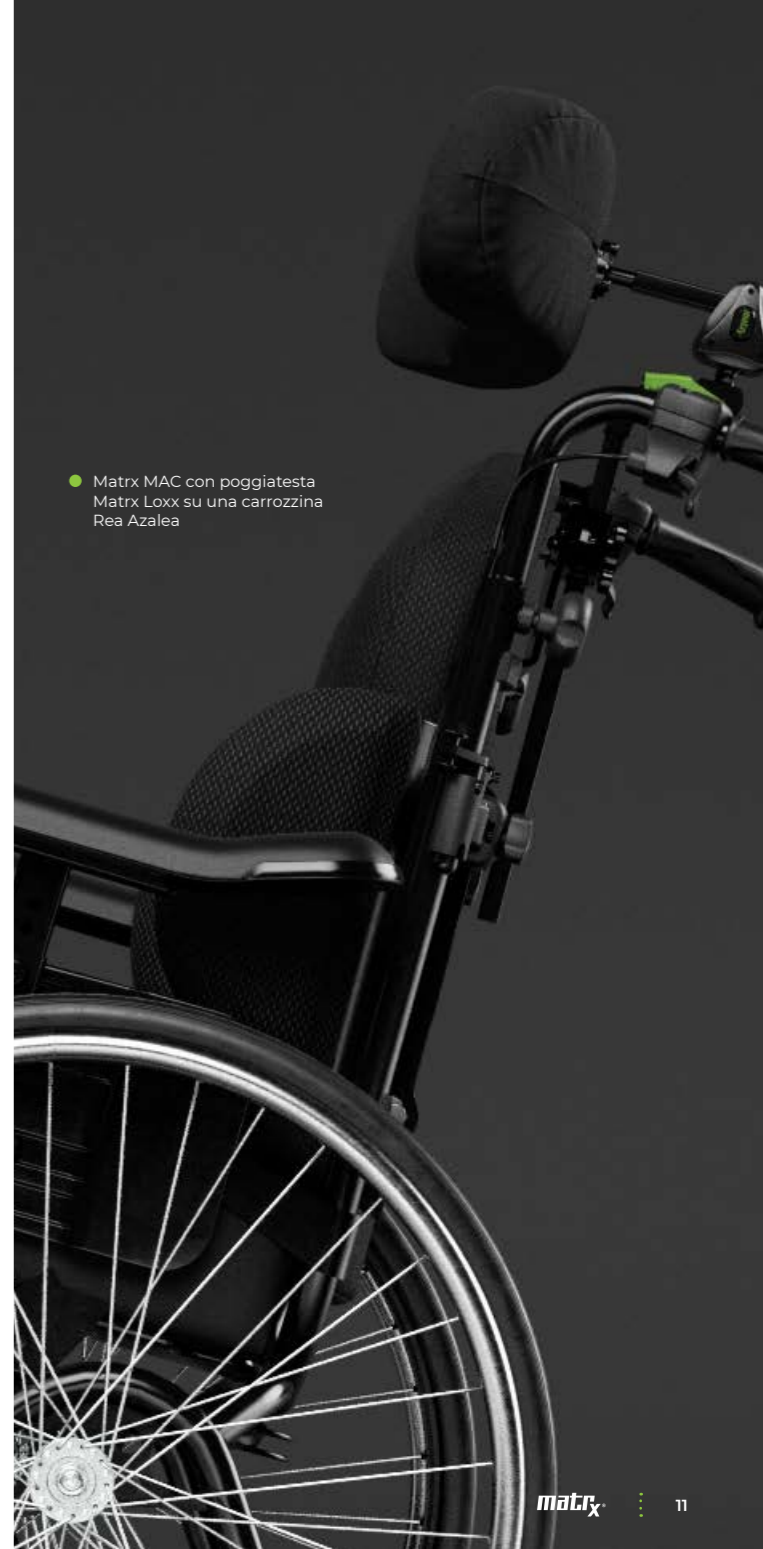



Per il trasporto in auto dell'utilizzatore, gli schienali Matrix MAC devono essere dotati di poggiatesta in conformità con le norme RESNA WC19 o ISO 7176-19



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

©2024 Invacare International GmbH. Tutti i diritti riservati. Si ritiene che tutte le informazioni riportate siano corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza previa consultazione. IT - 07/24.